


Rolă de masaj pentru corp 360°Manual

Producție

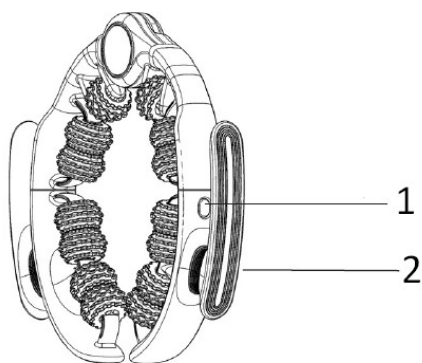

1. buton de demontare

Glisați butonul pentru a scoate mânerul

Mâner detașabil

Sfat: Mânerul detașabil poate fi folosit separat pentru masaj la nivelul gâtului, taliei, brațelor, picioarelor etc.

Caracteristici și funcții ale produsului

1. Designul acestui produs este inspirat de ergonomie și tehnologia de masaj profesional. Mai mulți role formează un grup, iar fiecare grup de roți din cauciuc este aranjat în mod ordonat conform unui unghi specific. Când rolele individuale funcționează, rolele la diferite unghiuri vor tonifia și întinde pielea simultan pentru a obține un efect de masaj profesional. Utilizarea repetată poate ajuta eficient la promovarea circulației sângelui, relaxarea și liniștirea țesutului muscular și, în același timp, accelerează metabolismul celular, elimină excesul de apă din celulele grase, făcând pielea mai delicată și mai netedă, și eliminând eficient celulita.


2. Forma circulară, concepută conform ergonomiei, și mânerul detașabil și separat pot acoperi eficient majoritatea zonelor corpului, permițându-vă să faceți masaj pe întregul corp cu ușurință.

Instrucțiuni de utilizare



Când aveți nevoie să masați abdomenul, fesierii, coapsele:

1. Vă rugăm să folosiți întregul aparat de masaj.
2. Timpul de utilizare pentru fiecare zonă de masaj este de aproximativ 5 minute, de 1-2 ori pe zi (utilizarea prelungită poate provoca leziuni ale pielii).
3. Când utilizați, asigurați-vă că rolele sunt perpendicular pe piele și folosiți o presiune adecvată pentru masaj repetat. Presiunea excesivă poate cauza vânătăi și hematome.
4. În timpul masajului fesierilor și zonei dorsale, acesta poate fi ajutat de alte persoane.

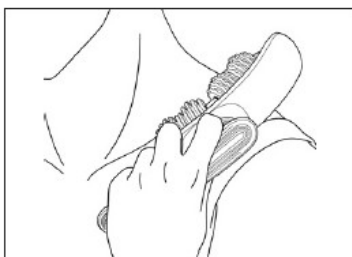

Când aveți nevoie de masaj pe brațe, gambe, precum și la nivelul gâtului și umerilor:

1. Apăsăți butonul și scoateți aparatul de masaj cu mâner.
2. Timpul de utilizare pentru fiecare zonă de masaj este de aproximativ 5 minute, de 1-2 ori pe zi (utilizarea prelungită poate dăuna pielii).
3. Când utilizați, asigurați-vă că rolele sunt perpendicular pe piele și folosiți o presiune adecvată pentru masaj repetat. Presiunea excesivă poate duce la vânătăi și hematome.

4. La masajul umerilor și gâtului, acesta poate fi ajutat de alte persoane.

Atenționări!

1. Persoanele cu capilare fragile sau cu afecțiuni vasculare subcutanate trebuie să evite utilizarea acestui produs.

2. Opriți utilizarea imediat dacă apare disconfort, cum ar fi hematom, vânătăi etc.

3. Pentru un efect optim, mențineți pielea curată și uscată. Nu utilizați cu produse lichide precum loțiuni și uleiuri esențiale. De asemenea, este convenabil pentru curățarea și întreținerea acestui produs.

4. În cazul pielii sensibile și vaselor de sânge fragile, utilizarea acestui produs poate provoca mici hematoame, utilizați cu atenție pentru a evita leziunile pielii.

5. Nu aplicați presiune excesivă, deoarece aceasta poate provoca vânătăi, roșeață și iritație.

6. Deoarece circulația sângelui la nivelul pielii este stimulată prin masaj, suprafața pielii poate deveni ușor roșie, ceea ce este un fenomen normal și va dispărea treptat de la sine.

SKU: rollosphere_P100

Numele produsului:

Rolă de masaj pentru corp 360°

Model No.: LM-8

Culoare: roz

Număr de referință: 13 / 2026

Producător:

Jinhua Gaodeng Sports Goods Co., Ltd

No. 83 Qingyun Road, Quanxi Town, Wuyi County, Jinhua City,

Provincia Zhejiang.

Importator și reprezentant autorizat:

DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

FABRICAT ÎN CHINA